

bioland[®]
Série Premium



Instruções de Uso

Balança Digital com conexão Bluetooth



Operando o aplicativo

Requisitos do Sistema

- Bluetooth 4.0
- Sistema operacional Android 4.3, iOS 6.13 ou versões acima
- 40 MB de espaço disponível.
- Conexão com a internet
- Acesso ao Google Play ou Apple Store



Operando o aplicativo

1- Abra o Google Play ou Apple Store e digite no campo de busca: aifit

O ícone do aplicativo é





Operando o aplicativo


2- Após selecionar o aplicativo, clique em instalar (será requisitada permissões). A velocidade do download e instalação pode variar de acordo com seu celular e conexão.





Operando o aplicativo

3- Uma breve apresentação do aplicativo será exibida, arraste a tela para a direita para avançar.

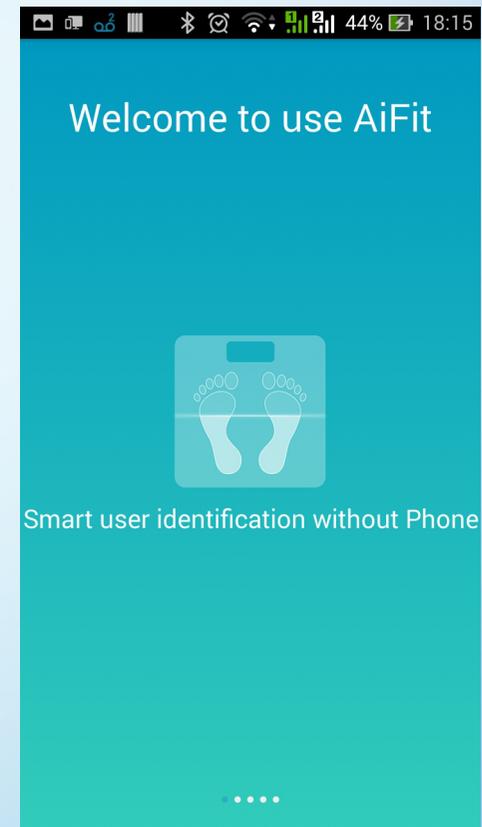




Operando o aplicativo

4- Esta é a tela de autenticação. São 3 opções:

- Login: Caso você já tenha um cadastro, basta selecionar esta opção.
- Register: Para fazer seu registro, selecione esta opção.
- Visitor: Caso queira fazer a medição sem fazer o cadastro, não será armazenado nenhuma informação das medições.

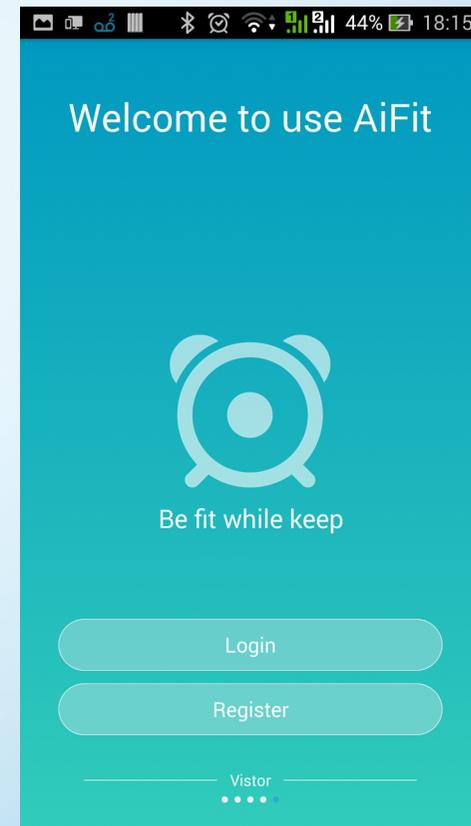




Operando o aplicativo

4- Esta é a tela de autenticação. São 3 opções:

- Login: Caso você já tenha um cadastro, basta selecionar esta opção.
- Register: Para fazer seu registro, selecione esta opção.
- Visitor: Caso queira fazer a medição sem fazer o cadastro, não será armazenado nenhuma informação das medições.

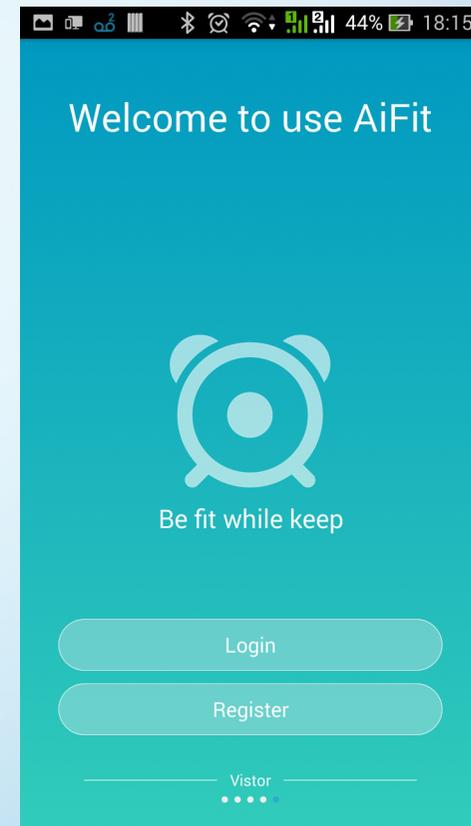



Operando o aplicativo

5- Para registrar, você vai precisar informar um e-mail válido e uma senha. Caso você queira conferir a digitação, pressione o botão 'CHECK'.

Register

Please enter your login email

Please enter your password

Register

Login


[Vistor](#)



Operando o aplicativo

6- Userinfo (Informações do Usuário)

Este campo é destinado para inserção de uma foto ou imagem ao seu cadastro.

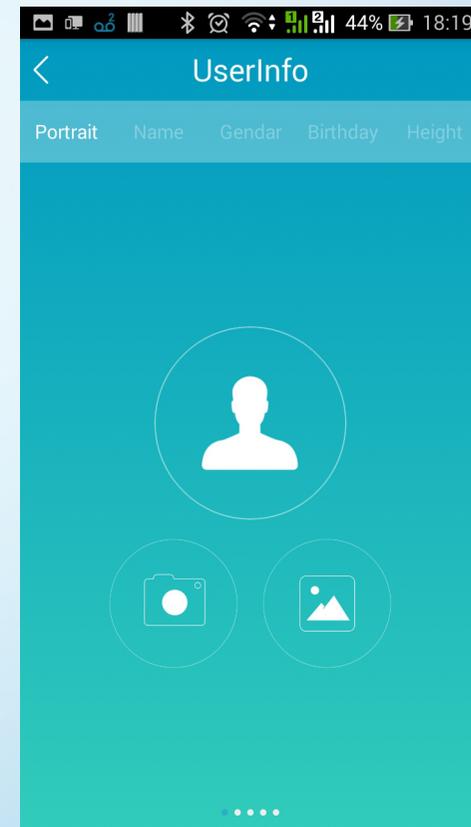




Operando o aplicativo

7- Nesta tela você vai informar o sexo:

Female - Mulher

Male - Homem

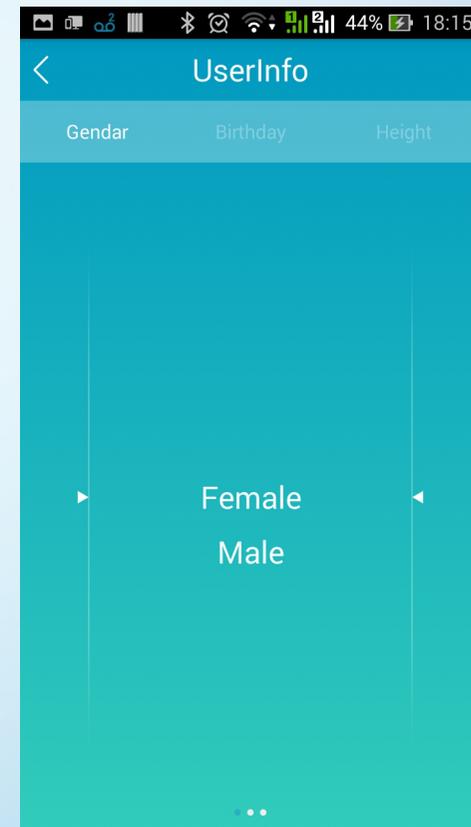




Operando o aplicativo

7- Nesta tela você vai informar o sexo:

Female - Mulher

Male - Homem

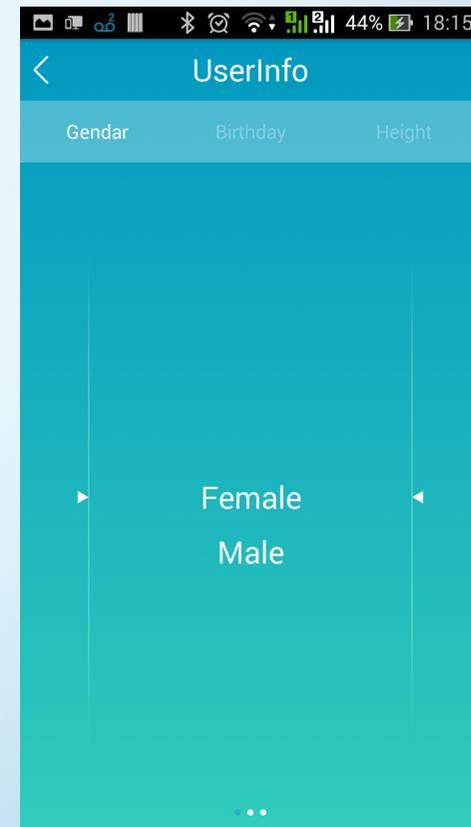



Operando o aplicativo


8- Birthday (Data de Nascimento)

Nesta tela o usuário vai informar a data de nascimento. A ordem é:

1º Coluna - Ano

2º Coluna - Mês

3º Coluna - Dia

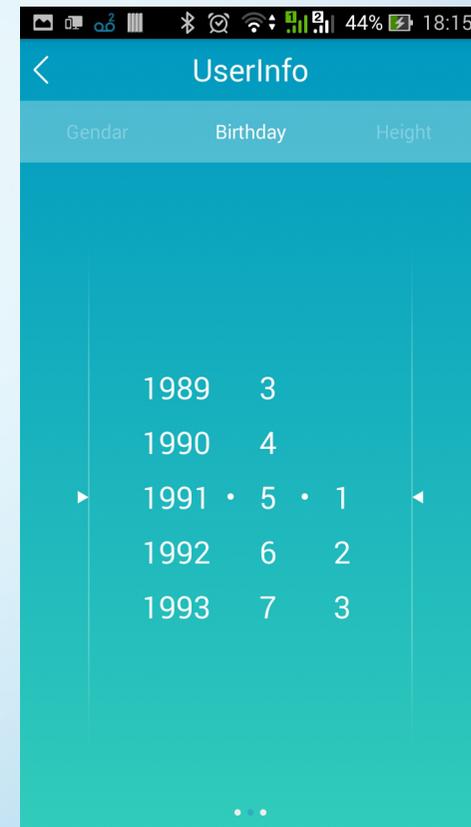




Operando o aplicativo

9- Height (Altura)

Nesta tela o usuário vai informar a altura em centímetros.


Após concluir, pressione 'DONE' para avançar.

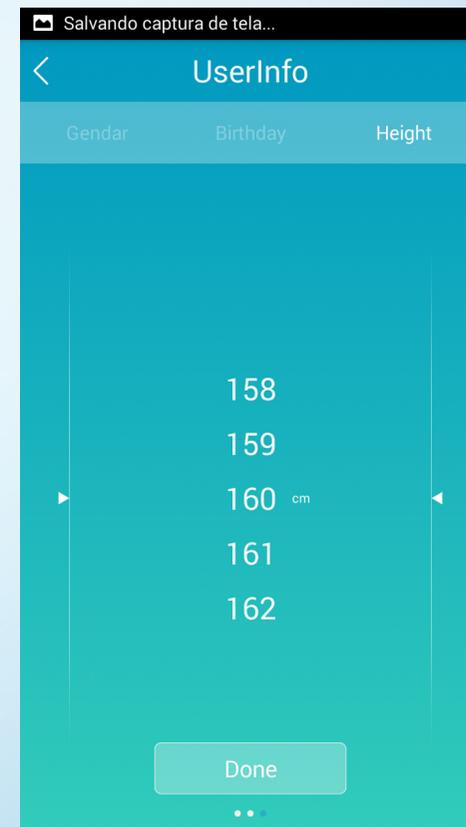



Operando o aplicativo

10- Nesta tela você irá conectar a balança ao seu smartphone. Caso o bluetooth não esteja ativo, o aplicativo irá requisitar a ativação do mesmo. Pressione 'Click to pair device' para iniciar a busca pela balança. Caso você não queira fazer este procedimento agora, basta pressionar 'Pair later' e fazer a conexão depois.

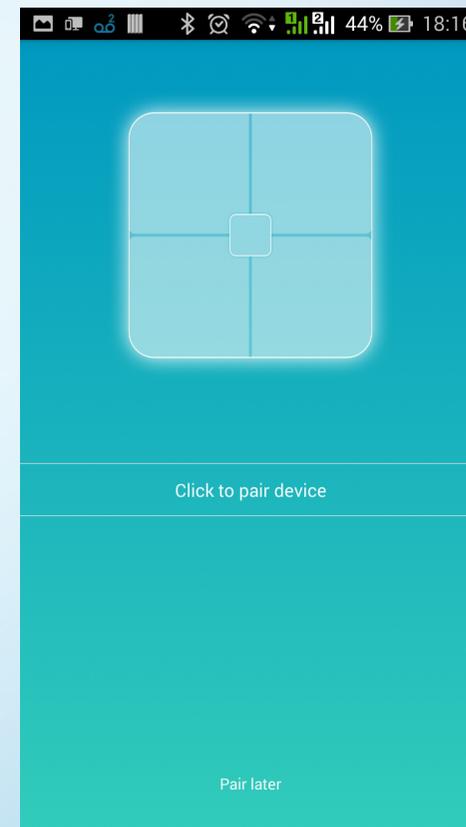




Operando o aplicativo

11- Neste momento você deve ligar a balança (pressione a plataforma). Vai aparecer o código dela, clique em 'Connect' para parear.

ATENÇÃO: Como se trata de uma conexão bluetooth, só funcionará um smartphone por vez. Sendo assim, caso haja mais de um, o sistema não funcionará.

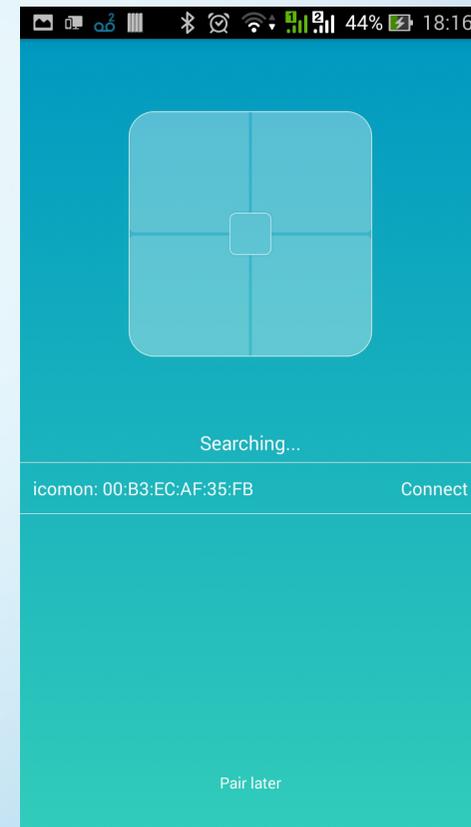



Operando o aplicativo

12- Software Updates (Atualização)

Caso haja alguma atualização disponível, o aplicativo lhe dará a opção de fazê-lo antes de efetuar a medição.


OBS: Caso você use a balança no modo visitante, não recomendamos a nova versão, pois a unidade padrão é libras. Para os usuários com registro, existe opção de conversão para kilos.





Operando o aplicativo

13- Esta é a tela de pesagem, para começar a medição basta subir na balança. Se a sua balança for uma EF950i, os dados de músculo, osso e líquido não serão exibidos (pois ela não possui essa função, apenas é disponível na EF955i).

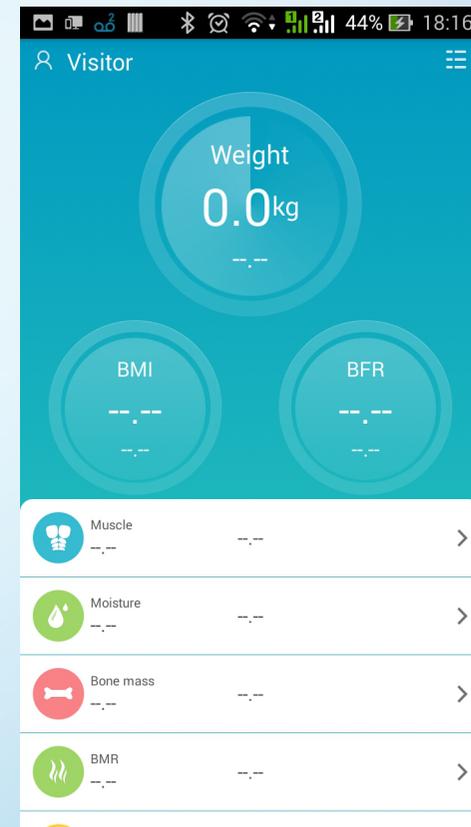




Operando o aplicativo

14- Durante a medição a tela é atualizada em tempo real. Caso você esteja fazendo a medição com análise corpórea (bioimpedância), não deixe a plataforma até a exibição dos dados.

OBS: Para fazer este tipo de medição, é importante estar com os pés descalços.


[Gestantes não devem fazer este procedimento.](#)

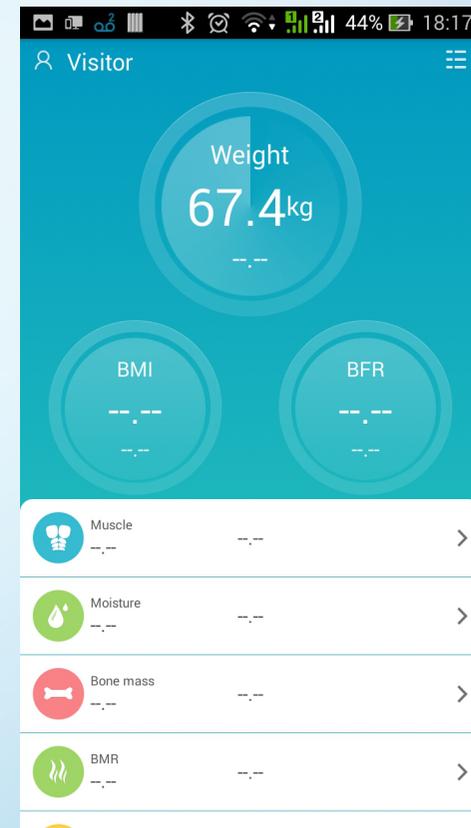



Operando o aplicativo

15- Usuários visitantes não geram históricos, caso deseje manter suas informações arquivadas, faça o login ou o registro.

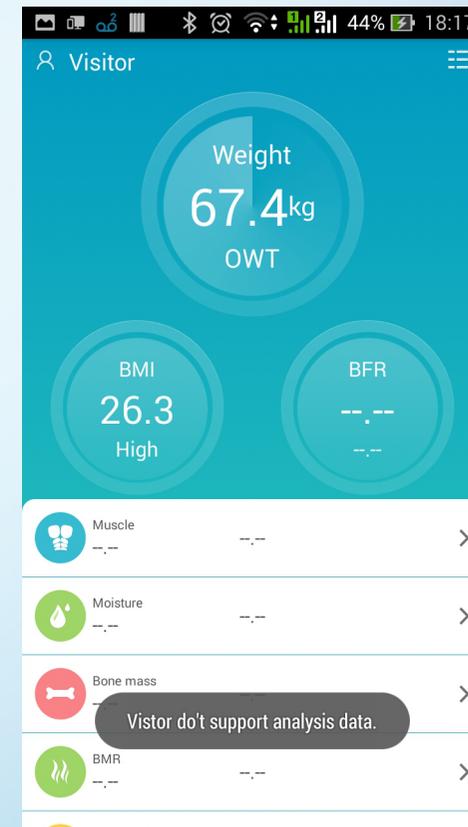




Operando o aplicativo

16- Os demais recursos estão disponíveis no ícone localizado na parte direita superior.

Atualmente o aplicativo se encontra apenas em inglês.

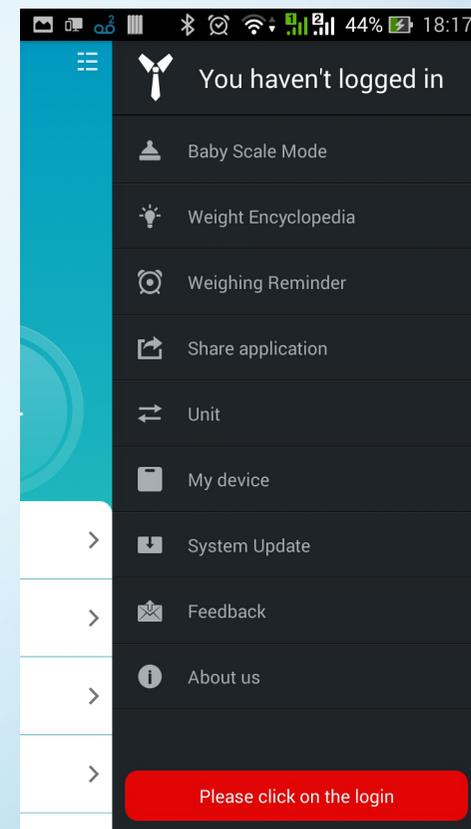

bioland[®]
Série Premium

Dúvidas ou informações adicionais:

www.biolandbrasil.com.br

sac@controller-sc.com.br

Fone: (11) 4063-0023

Fone: (31) 4063-9244

Fone: (51) 4063-9277