

• Dúvidas frequentes

Número	Problema	Possível Causa	Solução
1	Ruído ou cliques durante a operação	A operação dos braços de massagem encostam no tecido de cobertura	Não existe ação
2	Falha ao ligar	Proteção de aquecimento	Aguarde 30 min e tente novamente
		O alimentador de energia está mau encaixado	Instale novamente
		A chave seletora está na posição do meio.	Posicione o seletor na posição esquerda ou direita

Se você possuir algum problema, entre em contato com o importador oficial para manutenção.

Termo de Garantia

A **Controller Comércio e Serviço Ltda** proporciona a seguinte garantia ao comprador original da almofada massageadora **Bioland Modelo Am100**:

- 1) A **Controller Comércio e Serviços Ltda** garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação. Falhas na almofada massageadora devido a utilização em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta garantia;
- 2) Esta garantia não inclui a fonte fornecida com a almofada;
- 3) Não desmonte a almofada massageadora Bioland modelo AM100, pois isso cancelará a garantia e fará com que possa causar danos irreparáveis no produto;
- 4) Se a **Controller Comércio e Serviço Ltda** receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente;
- 5) Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da **Controller Comércio e Serviço Ltda.** para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a **Controller Comércio e Serviço Ltda.** ou ao canal de venda autorizado.

Importador por:

CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. das Universidades, 325 - Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137-315
Fone/Fax: (48) 3248-2828 - CNPJ.: 78.515.210/0001-00 - Site: www.controller-sc.com.br
País de fabricação: China
Validade indeterminada
Modelo: AM100

Muito obrigado por comprar nosso produto, antes de usar, favor ler com cuidado o manual do usuário e preste muita atenção nas INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA para uma utilização normal e correta.


Mantenha o manual do usuário de fácil acesso, para futuras consultas ou dúvidas.

- A nova solução de tração quádrupla, prolonga a vida útil do motor, sendo umas das tecnologias mais modernas existentes no mercado. Esse projeto garante a mesma intensidade da massagem durante o uso ao longo da vida útil do produto.
- Design único, oferecendo uma pressão maior, proporcionando uma massagem mais efetiva nos músculos, relaxando e estimulando a circulação sanguínea. A utilização reduz também dores musculares, fazendo com que o usuário se sinta mais relaxada após a massagem.
- A almofada possui diferentes sequências de massagem, para uma utilização mais efetiva.
- A estrutura do produto é super compacta, facilitando a utilização.
- O produto pode ser utilizado no carro ou em casa, dando mais portabilidade a massagem.
- Após 15 minutos, o produto desligará automaticamente.

• Nova tração de 4 partes + Super motor + proteção contra aquecimento

- A unidade principal de motorização garante mais estabilidade e tração.
- O motor possui uma proteção de aquecimento, para garantir a longa vida útil do produto.
- Quando o motor chegar no limite da temperatura, o produto desligará automaticamente. Siga as instruções para religar.

• Descrição das partes do produto

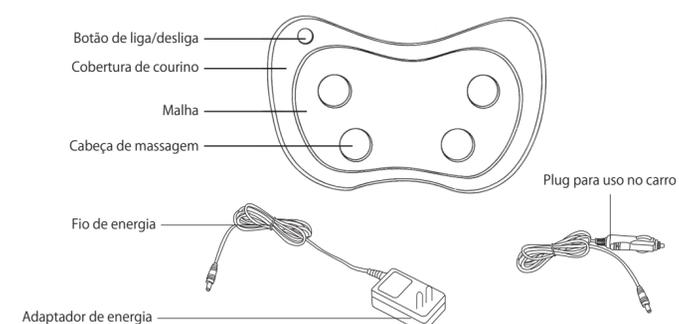

CARRO & CASA Almofada de Massagem

bioland®



Modelo: AM100


- 1 Alta circulação de ar
- 2 Início com um botão
- 3 Infravermelho
- 4 Design ultra-fino

Leia o manual com cuidado antes de operar o produto

• INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Limpe a superfície com um pano úmido (se necessário, aplique um detergente, mas nunca use solventes químicos).
- Não use água diretamente no massageador
- Use o massageador em intervalos de 15 minutos
- Não use o massageador após jantar, aguarde uma hora.

• Descritivo do produto

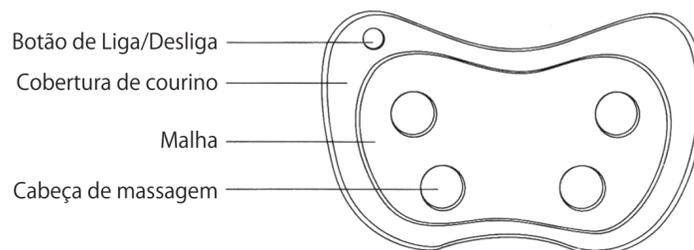

• Especificações técnicas

Voltagem de Entrada: 12V
Corrente de Entrada: 1.5-2.0A
Potência: 24W
Símbolo de Segurança: ☐
Adaptador de energia: -- ● -- +

• Vantagens

- Um botão para início
- Promoção da circulação sanguínea

• Uso para relaxamento no carro ou em casa



Plug para uso no carro
As duas aplicações usam o padrão de energia universal (12V) para carros. Para caminhões que possuem voltagem de 24V, esse produto não é compatível.