


## **TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TESTA, OUVIDO E SUPERFÍCIES DA PELE - ARKTUS (IP00440A)**

### **MANUAL DO USUÁRIO**

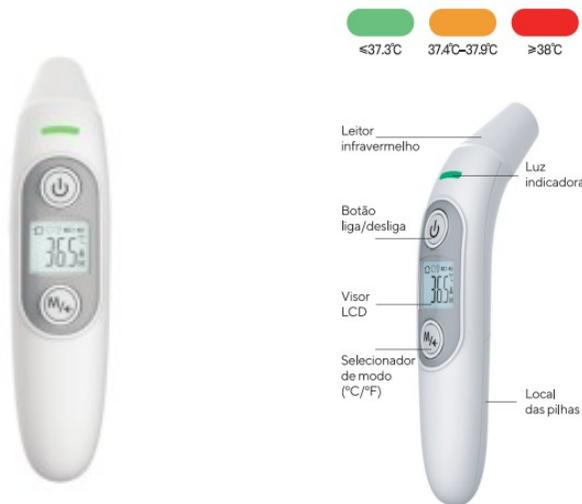

### **DETALHES DO PRODUTO**

1. Medição: O Termômetro pode ser utilizado para medição da temperatura corpórea (para identificação de febre) por meio da testa e do ouvido. Além disso, ele também mede a superfície da pele nos demais locais do corpo, para avaliação da temperatura em procedimentos estéticos. Este aparelho NÃO MEDE superfície de objetos. É de uso exclusivo corporal.
2. Identificador de três cores acima da tela: Sendo verde para temperaturas  $\leq 37,4^{\circ}\text{C}$ ; laranja para  $37,4^{\circ}\text{C} \sim 37,9^{\circ}\text{C}$ ; e vermelha para  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ .
3. Distância para medição: 3cm-5cm
4. Margem de precisão:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ .
5. Desligamento automático: O produto será desligado automaticamente após 32 segundos sem ser utilizado.
6. Memória de dados: mostra as últimas 32 medições realizadas.
7. Opção de escolha da unidade de medida:  $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{F}$ .
8. Necessita 2 pilhas alcalinas AAA para funcionar (não inclusas).

### **USANDO O TERMÔMETRO**

O uso correto do produto é essencial para uma medição mais precisa, por isso, o Termômetro Infravermelho Sem Contato contém as seguintes instruções para auxiliar o usuário a obter uma resposta correta com alta performance:

1. Aperte o botão superior para ligar o aparelho.
2. Modo aguardando medição: tela --- $^{\circ}\text{C}$  ou --- $^{\circ}\text{F}$ . Neste momento, aponte para o local da medição, e em até 1 segundo a temperatura irá aparecer. Lembrando que não é necessário

mudar nenhum tipo de modo de medição na tela. É só apontar para testa ou ouvido para medição corpórea (avaliação de febre) ou para a superfície desejada do corpo para medição da superfície da mesma (avaliação da temperatura em procedimento estético).

3. Modo desligamento automático: 32 segundos sem utilização.
4. Para colocar no modo mudo, pressione a tecla "M" por 1 segundo. Para voltar o som, é só apertar novamente a mesma tecla por 1 segundo.
5. Para ter acesso as memórias do aparelho, pressione o botão "M" por 3 segundos. Seguir apertando a tecla "M" para acessar uma por uma das 32 memórias.
6. Certifique-se que o local de medição não tenha nenhum cabelo ou barreira de medição como bonés ou objetos.
7. Para alterar a unidade de medida da medição ( $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{F}$ ), basta mudar a chave preta de seleção que fica na parte de trás, entre o local das duas pilhas.
8. **ATENÇÃO: Jamais pressionar os dois botões ao mesmo tempo. Caso isso seja feito, o sistema entrará em modo "reset" e todos os dados já salvos e as configurações de fábrica serão perdidos.**

### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

1. Este produto é usado para medir a temperatura corporal sem contato, pela testa e ouvido. Pode também ser utilizado para medição da superfície da pele nos procedimentos estéticos. Pode ser usado em bebês, crianças e adultos. É indicado para famílias, clínicas, hospitais e outros estabelecimentos.
2. Deixe este produto fora do alcance de crianças.
3. Manter o equipamento em ambientes com  $10^{\circ}\text{C}$  até  $60^{\circ}\text{C}$ .
4. É necessário manter o equipamento limpo e guardado em lugares secos.
5. O sensor que está localizado na frente do produto é muito frágil.
6. Não use/guarde o produto em ambiente com a umidade maior que 95%.
7. Não exponha o equipamento ao sol ou à água.
8. Não use o equipamento em ambientes que contenham barreiras eletromagnéticas.
9. Utilize 2 pilhas AAA.

### **COMPARTIMENTO DA BATERIA**

1. Para o funcionamento do produto, são necessárias 02 pilhas alcalinas AAA, as quais podem ser usadas 3.000 vezes continuamente. A bateria deverá ser trocada quando o símbolo da bateria aparecer na tela.
2. Abra o compartimento de bateria na parte de trás do produto e troque as coloque as duas pilhas. Certifique-se que as pilhas estão colocadas corretamente com os pontos positivos e negativos.
3. NÃO utilize pilhas recarregáveis.
4. É recomendado que as pilhas sejam removidas enquanto o aparelho não estiver sendo utilizado. Isso evitará possíveis danos no produto.
5. As pilhas não acompanham o produto. Devem ser adquiridas separadamente.
6. Juntamente no compartimento da bateria, você pode alterar a unidade de medida da medição ( $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{F}$ ). Para isso, basta mudar a chave preta de seleção que fica entre o local das duas pilhas. É necessário tirar as pilhas para fazer a mudança.

### **ARMAZENAGEM E GARANTIA**

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo de luz solar.

Garantia de 90 dias para defeitos de fabricação. Telefone Pós-Vendas gratuito: 0800-200-8022

**PRODUTO IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ 01.417.367/0001-78  
SANTA TEREZA DO OESTE/PR - TELEFONE PARA CONTATO: 0800-200-8022**