


TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO – MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL E DE SUPERFÍCIE (IP00450A)



MANUAL DO USUÁRIO

DETALHES DO PRODUTO


1. Modos de medição: termômetros de dois modos, corporal e superfície.
2. Tela de três cores: Sendo verde para $\leq 37.4^{\circ}\text{C}$; laranja para $37.4^{\circ}\text{C} \sim 37.9^{\circ}\text{C}$; e vermelha para $\leq 38^{\circ}\text{C}$.
3. A medição alcança de 32°C até 42°C .
4. Distância para medição: 3cm-5cm.
5. Margem de precisão: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Medição de alta precisão.
6. Desligamento automático: O produto será desligado automaticamente após 32 segundos de inutilização.
7. Memória de dados: Contém a possibilidade de visualizar últimas 32 medições.
8. Opção de escolha da unidade de medida: $^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{F}$.
9. Uso de duas pilhas alcalinas AAA (não acompanham o produto).

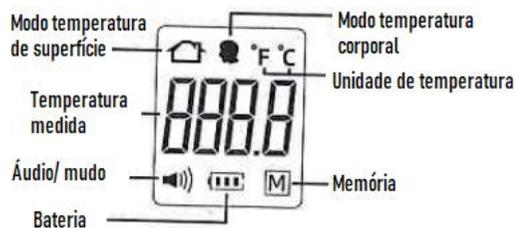

USANDO O TERMÔMETRO

O uso correto do produto é essencial para uma medição mais precisa, por isso, o Termômetro Infravermelho Sem Contato contém as seguintes instruções para auxiliar o usuário a obter uma resposta correta com alta performance:

1. Aperte o botão para ligar o aparelho.
2. Modo aguardando medição: tela ---°C ou ---°F. Neste momento, aponte para o local da medição, pressione o botão principal e em até 1 segundo a temperatura irá aparecer.
3. Modo desligamento automático: 32 segundos sem utilização.
4. Para ter acesso as memórias do aparelho, pressione o botão como aparelho desligado por 6 segundos. Após a aparição do "M" pressione o botão de medição para acessar as memórias. Para sair das memórias, aguarde o visor desligar automaticamente.
5. Certifique-se que o local de medição não tenha nenhum tipo de barreira, como cabelo, roupa, bonés ou objetos na superfície.
6. Para mudar de modo de medição (corporal/superfície), aperte o botão principal por um período de 5 segundos. Após isso, o equipamento mostrará o modo em que está: 1) Quando aparecer na parte superior da tela o ícone da cabeça, estará medindo a temperatura corporal; 2) Quando aparecer na parte superior da tela o ícone da casa, estará medindo a temperatura da superfície.

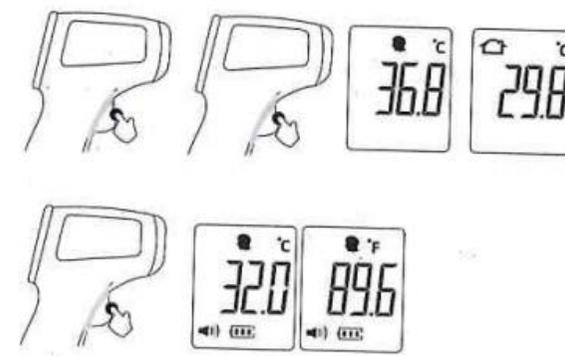

ATENÇÃO

1. Este produto é indicado para medir a temperatura sem contato, tanto corporal quanto de superfícies. Pode ser utilizado em bebês, crianças e adultos. É indicado para famílias, clínicas, hospitais e outros estabelecimentos. A temperatura corporal pode ser medida tanto na testa quanto no ouvido (locais com maior precisão da temperatura corporal).
2. Deixe este produto fora do alcance de crianças.
3. Manter o equipamento em ambientes com 10°C até 35°C .
4. É necessário manter o equipamento limpo e guardado em lugares secos.
5. O sensor que está localizado na frente do produto é muito frágil.
6. Não use/guarde o produto em ambiente com a umidade superior a 85%.
7. Não exponha o equipamento ao sol ou à água.
8. Não utilize o equipamento em ambientes que contenham barreiras eletromagnéticas.
9. Utilize 2 pilhas AAA.

COMPARTIMENTO DA BATERIA

1. Para o funcionamento do produto, são necessárias duas pilhas AAA, as quais podem ser usadas 3.000 vezes continuamente. A bateria deverá ser trocada quando o símbolo da bateria vazia aparecer na tela.
2. Abra o compartimento de bateria na parte inferior do termômetro e troque as pilhas. Certifique-se de que as pilhas estão colocadas corretamente com os pontos positivos e negativos indicados no produto.
3. Não utilize pilhas recarregáveis.

- É recomendado que as pilhas sejam removidas enquanto o aparelho não estiver sendo utilizado. Isso evitará possíveis danos no produto.

ARMAZENAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Armazenagem: Local seco, fresco e ao abrigo de luz solar.

Limpeza: Pano seco ou pouquíssimo umedecido com álcool 70°.

Manutenção: Apenas os técnicos da importadora podem realizar manutenção no produto. Telefone ao final do manual.

DETALHES DO PRODUTO

- Leitura e medida instantâneas; Rápido resultado, em apenas 1 segundo.
- Medida precisa e confiável; +/- 0.2 = alta precisão.
- Inteligente e prático: um único botão de fácil operação.
- Operação em 3 cores: verde, laranja e vermelho. Com função de alarme de febre.
- Desligamento automático que poupa bateria.

TABELA DE MEDIDAS

| COR | °C | ° F | SITUAÇÃO | IMAGEM |
|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| Vermelho | >32 | >89.6 | MUITO BAIXA | |
| Verde | 32.1-37.4 | 95.9-99.0 | NORMAL | |
| Amarelo | 37.5-38.1 | 99.1-101.3 | ATENÇÃO | |
| Vermelho | 38.2-42.9 | 101.5-109.2 | ALTA | |
| Vermelho | >43 | >109.4 | MUITO ALTA | |

GARANTIA

- A garantia é de 90 dias para defeitos de fabricação.



PRODUTO IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:
ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - CNPJ 01.417.367/0001-78
SANTA TEREZA DO OESTE/PR
AFE ANVISA: 8.02.844-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX FERNANDO ZANI
- CREFITO 8/8409
TELEFONE PARA CONTATO: 0800-200-8022