

Importante

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.**

Manual Aplicativo

Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:

quarkmedical.com.br/pdf/FAMILIA_DUALPEX_961.pdf


OBS: A leitura do manual do usuário é imprescindível para boas práticas de uso.

Atenção

Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando o checklist (disposto na parte interna da embalagem)

Instruções Gerais para Uso

1- A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

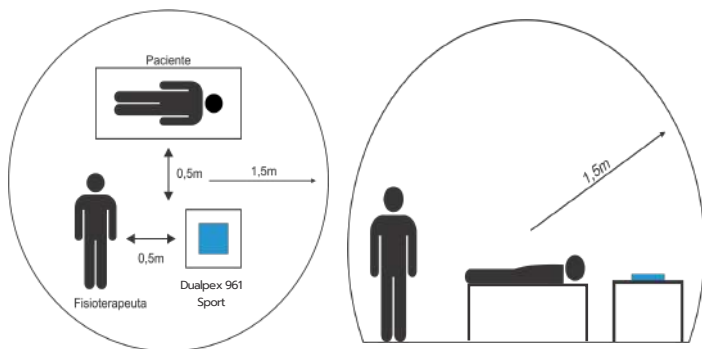


2- Conecte o cabo de força no equipamento e o plug na tomada da rede elétrica. Não há necessidade de verificar a tensão da rede elétrica (117V ou 220V), pois o equipamento fará a seleção da voltagem automaticamente.

3- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga. A mensagem com o nome do equipamento e revisão do software aparece no display. Durante este processo, ouve-se o som da campainha.



4- Conecte os cabos de terapia nos conectores de saída do equipamento e na outra extremidade dos cabos conecte os eletrodos.

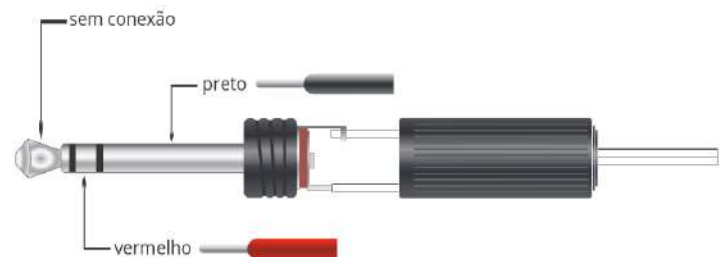




5- Opção 1 (Automático): Selecione o programa de terapia desejado, pressionando a tecla **Programa** (Programa) e depois as teclas Decrementa e Incrementa (↙ ↘), utilize essas teclas de acordo com a cor do cabo que estiver utilizando. As terapias pré-programadas estão no manual página **15**. Passe para o item **6**.

***Opção 2 (Manual):** Selecione através das teclas **T/ Freq.** (T / Freq. e Envelop) os parâmetros desejados.


6- Ajuste o tempo de terapia, pressionando a tecla **Tempo Ciclo** (Tempo Ciclo) e depois as teclas de incrementa e decrementa (↙ ↘)

7- Fixe os eletrodos na pele do paciente de acordo com a terapia desejada. (No caso do eletrodo de silicone, aplicar uma fina camada de gel na área a ser tratada).

8- Inicie a terapia pressionando a tecla Iniciar Terapia **INICIAR TERAPIA**

9- Eleve a intensidade de emissão de corrente até a potência desejada, pressionando a tecla (Controle de Intensidade)  e em seguida as teclas   (Decrementa e Incrementa).


10- Ao final do tempo programado para a terapia, ouve-se o som de finalização e a intensidade de corrente é levada a zero.

11- Para interromper a terapia antes do tempo programado, pressione a tecla .

Teste da Água com Eletrodos de Silicone


Passo a Passo

1- Pegue o equipamento, o (s) cabo (s) e os eletrodos de silicone para o teste, pegue um recipiente e o preencha com água da torneira.

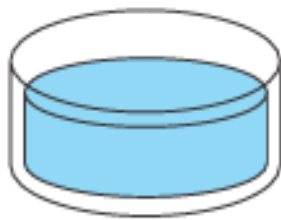

2- Inserir o cabo branco no **canal 1** e o cabo cinza no **canal 2**. **Atenção:** inserir os cabos para esse teste em momentos diferentes.

3- Submergir os eletrodos e manter uma distância de mais ou menos **3 dedos** entre eles.

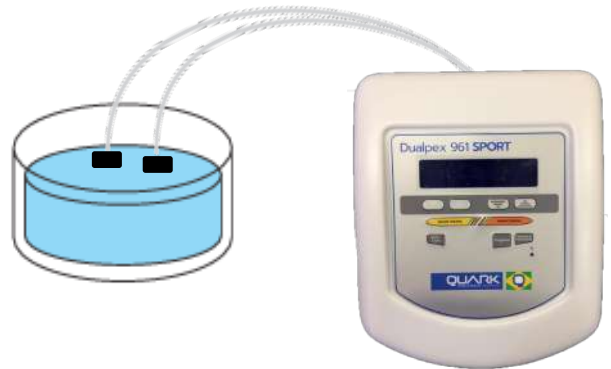

4- No programa 0, iniciar a terapia e subir até **60mA**. Movimentar bastante o cabo que está conectado no canal para ser mais fácil identificar se há algum problema.

*Se após realizar o teste apresentar Cabo Partido, o problema é no cabo.

5- Se não subir até 60mA, realizar teste com outro cabo reserva.

6- Subindo até o 60mA, retirar o cabo da água. A mensagem "**Cabo Partido**" deve aparecer.

*Se não apresentar mensagem de Cabo Partido, o problema é no equipamento.



Fabricante: Quark Produtos Médicos
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos

Indústria Brasileira -
CNPJ: 71.769.673/0001-59
Número ANVISA: 80079190022

Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800

www.quarkmedical.com.br
quark@quarkmedical.com.br