

Termo de Garantia

Este certificado garante ao proprietário que o produto fabricado pela Biotron foi testado e encontra-se em perfeito estado de utilização. Garantindo um serviço de reparo ou assistência técnica ao produto caso apresente defeito de fabricação ou mau funcionamento, conforme condições abaixo:

- 1- **Produto adquirido:** *AQUECEDOR QUINTINHO BIOTRON.*
- 2- **Prazo de garantia:** 1 ano contando a partir da data de aquisição especificada na Nota Fiscal de compra.
- 3- **Cobertura:** Aos custos de mão de obra e reposição de peças que apresentem defeitos de fabricação.
- 4- **Abrangência:** A Biotron garante ao equipamento *AQUECEDOR QUINTINHO BIOTRON* contra defeitos de material e mão de obra, desde que o equipamento seja utilizado com adequadas condições de uso e seja operado de acordo com as especificações do manual técnico de instruções.
- 5- **Esta garantia não cobre:**
 - 5.1 Defeitos ou danos resultantes pelo mau uso do equipamento, arranhões, fissuras, trincas, danos causados às superfícies plásticas em razão ou modo que não especificado neste **MANUAL**;
 - 5.2 Defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalações, alterações, qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela Biotron;
 - 5.3 Defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes e descarga elétrica;
 - 5.4 Desgaste natural das partes, peças e componentes;
 - 5.5 Custos de substituição de peças que apresentem desgaste mecânico natural.
- 6- **Garantia:** Para reparar o seu equipamento, leve-o ao local onde foi realizada a aquisição ou entre em contato com a Biotron. Nesta oportunidade você deverá ter em mãos a Nota Fiscal da compra para pronto atendimento.
As peças trocadas terão a garantia restante de acordo com a Nota Fiscal da compra ou de 90 dias caso falte um mês ou menos para término da garantia de um ano.
- 7- **Transporte e deslocamento:** Despesas com deslocamento, envio por correio ou transportadora, bem como os riscos e seguro para remessa do produto para conserto são de total responsabilidade do usuário.
O produto deverá ser devidamente embalado e enviado a Biotron, junto com uma cópia da Nota Fiscal ou documento correlato que comprove a data de aquisição do mesmo. Para informações complementares, envie um e-mail para sac@biotron.com.br ou entre em contato com a Biotron pelo telefone (35) 3473-7000.
- 8- **Outras informações:** Para dúvidas, sugestões e novas dicas não deixem de acessar o nosso site: www.biotron.com.br onde você encontra estas e muitas outras informações importantes, além de conhecer a nossa linha completa de produtos e várias outras facilidades que representam a nossa filosofia: qualidade, tecnologia e inovação que são estrategicamente desenvolvidos visando o seu conforto, economia e praticidade.

Santa Rita do Sapucaí – MG -
37540-000

CNPJ 08.979.861/0001-75
55 – (35) 3473-7000

www.biotron.com.br

REV00

Responsável Técnico
Iago Rezende Ferreira
CREA/MG – 04.9.0000202982



Manual Do Usuário

Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente às instruções contidas neste manual.

AQUECEDOR QUINTINHO BIOTRON

Parabéns, você acaba de adquirir um produto tecnológico e totalmente inovador desenvolvido pela Biotron.

O **AQUECEDOR QUINTINHO BIOTRON** é um equipamento utilizados em clínicas de ultrassom, fisioterapia e estética para aquecimento de gel, óleo, creme e demais substâncias, proporcionando aos pacientes um conforto a mais durante os procedimentos de ultrassonografia. Desenvolvido com moderna tecnologia, o **AQUECEDOR QUINTINHO BIOTRON** permite um aquecimento mais homogêneo e uniforme, com ótima qualidade e deixando o gel à uma temperatura agradável para os pacientes durante os exames.

Biotron

AQUECEDOR QUINTINHO

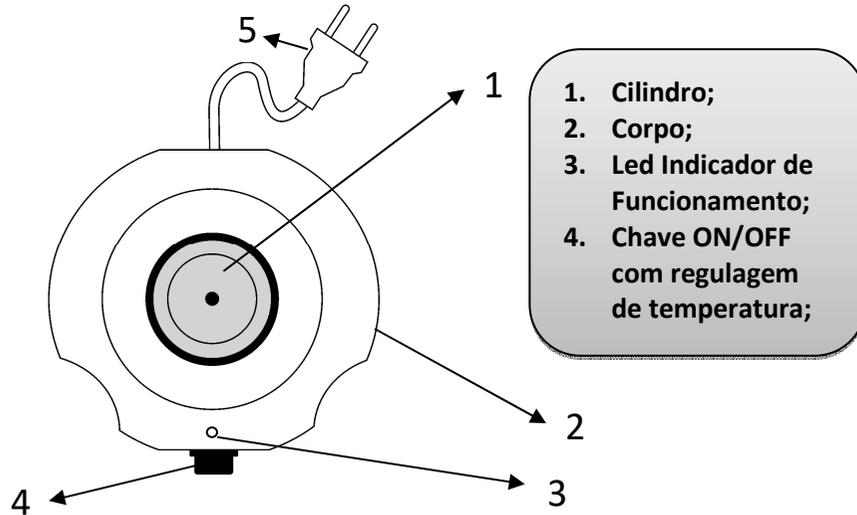


Figura 1 – Aquecedor Quentinho vista superior

Características e Vantagens:

1. Utilização simples;
2. Aquecimento à seco, homogêneo de 1 frasco;
3. Sistema de aquecimento feito por resistências elétricas;
4. Utiliza um sensor para regular a temperatura de aquecimento;
5. Baixo consumo de energia;
6. Possui luz indicadora de funcionamento;
7. Funciona em 127VAC e em 220VAC (Bivolt automático);
8. Acionamento através de chave proporcional possibilitando ajuste de diferentes temperaturas;
9. Garantia de um ano.

Considerações Importantes:

1. Somente profissionais capacitados devem manusear o aquecedor;
2. Não carregue ou levante o Aquecedor segurando pela parte de dentro do cilindro;
3. Cuidado ao tocar o cilindro quando se utilizar altas temperaturas;
4. Não deixe água ou qualquer outro líquido cair no interior do produto;
5. Sempre manter o cilindro higienizados, utilizando um pano com álcool.

Informações Técnicas:

Voltagem	127V e 220V (Bivolt automático)
Frequência	50Hz / 60Hz
Material	Plástico PSAI
Cor do corpo	Branco
Dimensões do produto	158X132X158 mm (Comprimento/Altura/Largura)
Dimensões da embalagem	200X160X200 mm (Comprimento/Altura/Largura)
Diâmetro e Altura do Cilindro	53 mm / 120mm
Peso do produto	0,4 Kg
Peso do produto embalado	0,5 Kg
Temperatura mínima e máxima	31°C até 68°C
Garantia	1 Ano

Modo de Utilização:

ADVERTÊNCIA!

Cuidado - Risco de queimaduras Não toque as partes metálicas.

1. Conecte o cabo de energia na tomada;
2. Ligue o aquecedor girando a chave frontal;
3. Coloque o frasco de gel dentro do cilindro, para que seja aquecido;
4. Aguarde aproximadamente 30 minutos (dependendo da temperatura ajustada) para que o cilindro se aqueça;

IMPORTANTE!

- Para garantir a segurança elétrica do aparelho durante toda a vida útil, recomendamos que o equipamento seja verificado por um profissional especializado nos intervalos regulares de no mínimo uma vez a cada dois anos (após a garantia).